

# Sonaris

## Přístroj pro klasickou sonoterapii a fonoforézu


Přístroj je vybaven speciálně navrhovanými hlavicemi, které umožňují práci ve frekvenci 1 MHz a 3,5 MHz, díky čemuž lze selektivně působit jak na povrchové, tak i hlubší tkáň. Dva rozměry hlavic – 1 cm<sup>2</sup> a 4 cm<sup>2</sup> – umožní práci na malých a velkých plochách.

Přístroj má precizní pětibodový ukazatel zatížení hlavice se zvukovou signalizací.



Malé rozměry a hmotnost usnadňují transport a práci mimo hlavní pracoviště. K přístroji se dá přikoupit speciální brašna.

Kombinovanou terapii lze provádět ve spojení s využitím dalších přístrojů – Etius a Etius ULM.

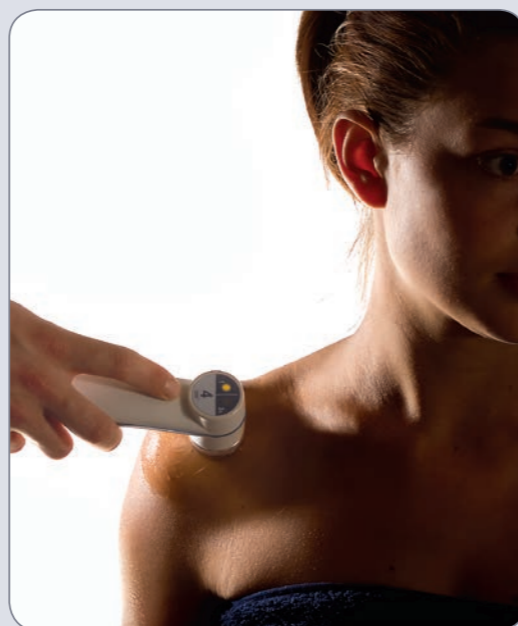

### Funkční vlastnosti

precizní ukazatel zatížení hlavice  
grafický displej  
stabilizace intenzity hlavic

### Sonaris S

●

●

●

### Programové režimy

pednastavené programy  
uživatelské programy

52

10

### Spolupráce s hlavicemi

dvoudílná hlavice  
1/3,5 MHz, 4 cm<sup>2</sup>

○

dvoudílná hlavice  
1/3,5 MHz, 1 cm<sup>2</sup>

○

### Technické parametry

max. intenzita ultrazvukové vlny

2,5 W/cm<sup>2</sup>

frekvence v pulzním režimu

16, 48, 100 Hz

pracovní cyklus v pulzním režimu

10, 25, 50, 75 %

píkon

230 V/40 W

rozměry ŠxHxV

30x23x11 cm

hmotnost

max 3 kg

### Standardní vybavení

síťový kabel

●

náhradní pojistky WTA-T 800 mA/250 V

2

gel 0,5 l

●

### Volitelné vybavení

hlavice 1/3,5 MHz, 1 cm<sup>2</sup> s úchytem

○

hlavice 1/3,5 MHz, 4 cm<sup>2</sup> s úchytem

○

kabel pro kombinovanou terapii

○

PRO bag

○

stolek Versa

○