

Avaco



Podtlaková terapie

TECHNOLOGIE

- odolná konstrukce
- pohodlná klávesnice
- signalizace plné nádrže na vodu
- možnost regulace podtlaku



REŽIM PRÁCE

- kontinuální
- pulzní
- střídavý pulzní
- synchronizovaný s proudem
- pulzní se zvětšeným dolním podtlakem



FUNKČNOST

samotěsnící vakuové elektrody

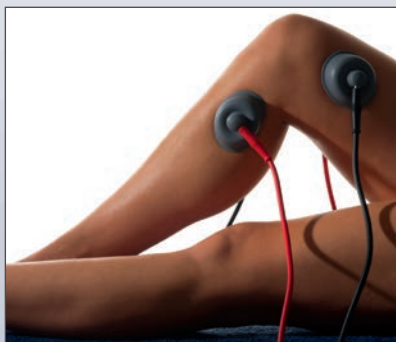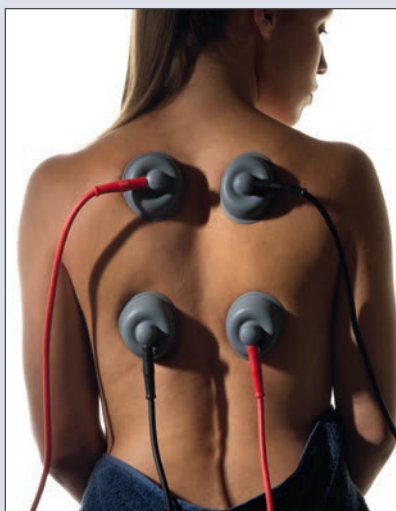

PODTLAKOVÁ TERAPIE

- režimy práce: kontinuální, pulzní, střídavý pulzní, synchronizovaný s proudem, pulzní se zvětšeným dolním podtlakem
- dva nezávisle zapínané obvody (snadná práce v jednoobvodovém režimu)
- samotěsnící vakuové elektrody
- možnost regulace podtlaku
- kontrola provozních parametrů během ošetření
- signalizace plné nádrže na vodu
- speciální režim pro vyprazdňování nádrže
- samostatné zásuvky pro připojení elektrod pro elektroléčbu
- spolupráce s elektrostimulátory Astar

TECHNICKÉ PARAMETRY

Avaco

pulzní frekvence podtlakové vlny	6, 12, 20, 40, 60 imp/min
podtlak	max. 500 mbar/hPa
krok regulace podtlaku	100 – 500 mbar, krok 40 mbar
počet vakuových elektrod	4
rozměry	30 x 26 x 12 cm
hmotnost	3,5 kg
síťové napájení, příkon	230 V, 50 Hz, 40 VA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

síťový kabel	1 ks
kabely pro propojení s elektrostimulátory Avaco	4 ks
podtlakový kabel	4 ks
vakuové elektrody 60 mm	4 ks
vložky z viskózy 60 mm	4 ks
vyhrazený držák	2 ks
náhradní pojistky	2 ks
návod k obsluze	1 ks

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

vakuové elektrody 90 mm	
vložky z viskózy 90 mm	
stolek Versa / Versa X	

